


Epidemic emergency products

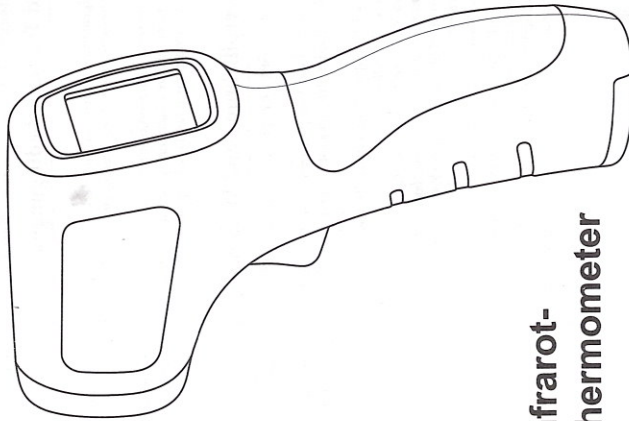

Infrarot- Thermometer

Modell Nummer: TF-600

Shenzhen Quick Zoom Technology Co., Ltd.

- Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank für Ihren Kauf des Infrarot-Thermometers. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um das Produkt richtig zu verwenden.
- Seien Sie vor der Verwendung vorsichtig und benutzen Sie das Infrarot-Thermometer gemäß den Anforderungen des Handbuchs.
- Finden Sie bitte die Garantiekarte beim Handbuch. Um Ihre Interessen zu schützen, bewahren Sie bitte die Garantiekarte in Ordnung auf. Sie können während der Garantiezeit einen kostenlosen Garanteservice nehmen.
- Bitte bewahren Sie das Handbuch zusammen mit dem Produkt auf. So können Sie es jederzeit bei Bedarf überprüfen.

Struktur und Zusammensetzung

Dieses Produkt besteht aus Infrarotsensor, Mikroprozessor, Speicher, Netzteil, elektroakustischem Original-LCD und Hülle.

Produktzubehör: Handbuch, Garantiekarte, Bescheinigung der Konformität

Produktname	Infrarot Thermometer
Messmodus	Medizinisches Infrarot-Thermometer
Messbereich	32.0 C - 43C
Messentfernung	1-15 CM
Temperaturmesszeit	1 Sekunde
Anzeigegenauigkeit	0.RC
Erkennungsgenauigkeit	35 C- 42 C
Operationsumgebungstemperatur	16-35C
Batteriespezifikation	DC3V
Arbeitsleben	3 Jahre
Anzeigeeinheit	Celsius/Fahrenheit
Automatische Abschaltung	15 Sekunde
Volt	2.70V
Hinterlicht	Monochrome Hinterlicht
Speichergruppennummer	Körpertemperatur 32 Gruppen

Service nach dem Verkauf

Kundendienst: Shenzhen Quick Zoom Technology Co., Ltd.
 Adresse/Produktion Adresse: No.8, Chuangye 4th Strasse, Zhangbei Dorf, Ailian
 Gemeinschaft, Longcheng Strasse, Longgang Kreis, Shenzhen
 Netzseite: <http://www.zmvideo.com.cn/>

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vorsichtig durch, bevor Sie dieses Thermometer verwenden.

⚠ Achtung:

- Das Produkt kann das Überwachungsinstrument für die kontinuierliche Temperaturüberwachung nicht austauschen.
- Der Temperaturfühler ist ein empfindlicher Teil des Infrarot-Thermometers. Der muss vorsichtig geschützt werden.
- Bitte entsorgen Sie die gebrauchte Batterie und beschädigen Sie das Thermometer nicht.
- Bitte senden Sie die Batterie und das Thermometer zur Entsorgung an den vorgesehenen Umweltschutzort, um die Umwelt zu schützen.
- Wenn das Produkt länger als 2 Monate nicht verwendet wird, ist es verbindlich, dass die Batterie zur Lagerung herausgenommen wird.
- Setzen Sie das Produkt weder Sonne noch Wasser aus, weil dies zu Schäden oder zur beschleunigten Alterung führen kann.
- Bitte schütteln sie das Produkt nicht, weil dies zu Schäden führen kann.
- Der normale Temperaturbereich des menschlichen Körpers ändert von Person zu Person.
- Die Körpertemperatur steigt während körperlicher Bewegung oder der emotionalen Erregung an. Es wird nicht empfohlen in diesem Zeitpunkt zu messen. Bitte ruhen Sie sich aus, warten Sie 20 Minuten, und messen Sie dann.

Bei der Verwendung dieses Produkts, beachten Sie die Folgenden:

- Die Maschine ist nicht wasserdurchlässig. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion für weitere Methode.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der Spitze des Temperaturfühlers, der einen präzisen Temperatursensor hat.
- Vermeiden Sie die Messungen über 40 C (104 f) oder unter 10 C (50 f), die außer der normalen Betriebstemperatur dieses Thermometers sind.
- Verwenden Sie das Thermometer nur für die vorgesehenen Funktionen. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie es bei Kindern verwenden.